

..やわらかタッチ..

ミムロそけいベルト

(脱腸帯)

特長

1. このベルトは肌に直接装着できるよう設計されています。
2. ベルトの素材は肌にやさしい綿パイル製。表面は(ナイロン)マジック織。サイズ調節が自由です。
3. スポンジはポリエチレン樹脂を基材とした柔軟・緩衝・断熱・浮湯・耐熱性に優れ、肌にやさしい作りです。



ご使用方法

1. ベルトを予め組立て、上側から下着を履くように身につけます。
2. 仰向けに寝た姿勢でヘルニア部を落ち着かせ、スポンジの数を調整して面板の裏側に装着して下さい。(4枚までカバー内に挿入可能)
3. ベルトはバックルに通し、サイズ調整して下さい。
4. このそけいベルトは起床時常に装着することをお勧めします。


装着時(正面)



ウエスト、ズレ防止ベルトをバックルに通し組立て下着を履くように身につけます。



ウエストベルトを左右に引きサイズ調整

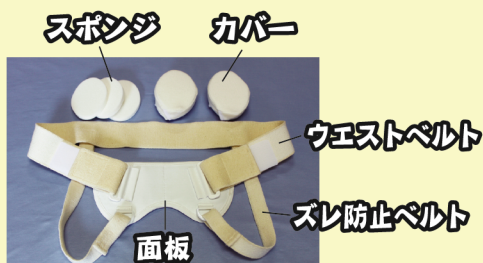

装着時(背面)



オーダーメイド(納期3週間程度)出来ます!
お気軽にご相談下さい。

品番	605	
製品タイプ	標準	
	ウエストベルト	ズレ防止ベルト
ベルト幅	50mm	20mm
ベルト長さ	95cm	50cm
腰回り適応範囲	65cm～120cm	フリー
カラー	面板-白、ベルト-アイボリー	
付属品	スポンジ6枚 8cm×6cm(7mm厚)、カバー2枚 スポンジカバーの色はアイボリー又はベージュ(色指定不可)	
価格	10,290円(税込価格)	

販売代理店

製造元

株式会社 ミムロ

〒130-0023 東京都墨田区立川1-16-17 タテカワ116-1F

TEL 03-3633-5260 FAX 03-3633-4508

ホームページ <http://www.stoma-belt.jp>

Eメール info@stoma-belt.jp